

# MiniLift125

SystemRoMedic™

Carga  
operacional  
segura  
125 kg

Brazo de grúa fácilmente ajustable

Fácil de maniobrar

Asas de empuñadura agradable con múltiples opciones para la colocación de las manos para el usuario

Guía rápida en la grúa

**Patrón de bipedestación único**

Batería de alta capacidad con larga vida útil

Formato compacto

Carga incorporada

Soporte suave, ajustable en la parte inferior de las piernas

Ruedas traseras bloqueables


Placa de pies baja con superficie antideslizante



Ampliación de la base eléctrica

## Una solución única para una bipedestación activa - con ampliación de la base eléctrica

MiniLift125 es una grúa móvil de bipedestación que se utiliza, en combinación con un chaleco especialmente adaptado, para ayudar a los usuarios con funciones reducidas al levantarse de estar sentado a una posición de pie. MiniLift125 cuenta con una construcción que ofrece una experiencia de bipedestación totalmente única y extremadamente cómoda. La grúa también es compacta y conveniente y muy fácil de maniobrar; características que, en combinación con la posibilidad de ajustar la configuración óptima para cada usuario, la hace muy útil en la mayoría lugares y situaciones.

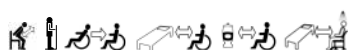

# MiniLift125

## Bipedestación extremadamente cómoda y activa con patrón de movimiento natural

MiniLift125 ha sido desarrollada para, de la forma más cómoda y suave posible, ayudar al usuario al levantarse de estar sentado a una posición de pie. Las asas y los soportes laterales ofrecen múltiples opciones de colocación de manos para el usuario. La placa de pie estable antideslizante es muy baja y los soportes de la parte baja de las piernas, así como el brazo de grúa, se pueden ajustar para adaptarse a cada usuario de manera óptima. Cuando MiniLift125 se combina con los accesorios de elevación adecuados, el usuario recibe el apoyo bajo los pies, por la parte delantera de las piernas y detrás de la espalda, lo que proporciona un procedimiento seguro así como una bipedestación activa. La construcción mueve al usuario hacia delante y hacia arriba de forma segura en un patrón de movimiento natural y, al mismo tiempo, se ejercitan los músculos de las piernas y el equilibrio. MiniLift125 está fabricada en acero para la estabilidad y la fuerza y es adecuada para los usuarios con un peso de hasta 125 kg.



Bipedestación activa con patrón de movimiento natural

## ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

MiniLift125 \_\_\_\_ Grúa móvil de bipedestación con ampliación de la base eléctrica \_\_\_\_ Nº Art 400641434

## INFORMACIÓN TÉCNICA

Carga operacional segura	125 kg
Longitud del usuario, min-max	1400-2000 mm
Material	Acero pintado en polvo
Altura	995 mm
Longitud	900 mm
Anchura de la base, externa	600 - 890 mm
Anchura de la base, interna	445 - 745 mm
Peso	39 kg
Ampliación de la base	Eléctrica
Altura del reposapiés, para el usuario	50 mm
Ruedas, diámetro	80 mm
Velocidad de elevación, sin carga	35 mm/s
Bajada de emergencia	Manual y eléctrica



MiniLift125 cumple con los requisitos de los productos Clase 1 de la Directiva de Técnicas Médicas 93/42/EEC.



Mando ergonómico y fácil de usar con 4 botones.



Nueva caja de control con diagnósticos, por ejemplo, contador de elevación e indicador de sobrecarga.

Botón de bajada de emergencia eléctrica disponible en la caja de control.

## ACCESORIOS

Nº Art.	Nombre de producto	Descripción
45500003-009	ThoraxSling	Poliéster, XS
	ThoraxSling	Poliéster, S
	ThoraxSling	Poliéster, M
	ThoraxSling	Poliéster, L
	ThoraxSling	Poliéster, XL
	ThoraxSling	Poliéster, XXL
45550004-009	ThoraxSling	Lavable, S
	ThoraxSling	Lavable, M
	ThoraxSling	Lavable, L
	ThoraxSling	Lavable, XL
	ThoraxSling	Lavable, XXL
	ThoraxSling	
45600004-008	ThoraxSling	Desechable, no tejido, S, 5 st
	ThoraxSling	Desechable, no tejido, M, 5 st
	ThoraxSling	Desechable, no tejido, L, 5 st
	ThoraxSling	Desechable, no tejido, XL, 5 st
	ThoraxSling	Con soporte de asiento, poliéster, S
	ThoraxSling	Con soporte de asiento, poliéster, M
45690004-008	ThoraxSling	Con soporte de asiento, poliéster, L
	ThoraxSling	Con soporte de asiento, poliéster, XL
	ThoraxSling	Con soporte de asiento, desechable, no tejido, S, 5 st
	ThoraxSling	Con soporte de asiento, desechable, no tejido, M, 5 st
	ThoraxSling	Con soporte de asiento, desechable, no tejido, L, 5 st
	ThoraxSling	Con soporte de asiento, desechable, no tejido, XL, 5 st
70200033	CalfStrap	Correa con borreguillo para MiniLift125 a partir del número de serie 125001653
770200089	Hand control HB33-6	Mando con 6 botones. Con servicio, estado de la batería e indicadores de sobrecarga
70200029	External charger Linak	Cargador externo para todos los modelos y variantes de MiniLift

### ThoraxSling SystemRoMedic™

ThoraxSling es un chaleco personalizado y muy cómodo que se usa junto con las grúas móviles de bipedestación SystemRoMedic™ de Handicare. Es fácil de colocar para el cuidador a la vez que ofrece al usuario una sensación extra de seguridad al ponerse de pie y en los entrenamientos de andada. ThoraxSling también facilita las visitas al inodoro. ThoraxSling está disponible en dos modelos; uno que proporciona apoyo detrás de la espalda (ThoraxSling) y otro que también proporciona apoyo debajo de las nalgas (ThoraxSling, con soporte de asiento), y en diversos tamaños y materiales.

### Otros modelos y variantes de las grúas móviles de bipedestación MiniLift.

MiniLift está disponible en varios modelos y variantes con diferentes capacidades de carga, con ampliación de la base eléctrica o manual y con la altura estándar o las patas bajas para el uso con camas bajas.

Nº Art.	Nombre de producto	Descripción
401100334	MiniLift200	Grúa móvil de bipedestación con ampliación de la base eléctrica, carga operacional segura 200 kg
60300010	MiniLift160EM	Grúa móvil de bipedestación con ampliación de la base manual, carga operacional segura 160 kg
60300011	MiniLift160EM	Grúa móvil de bipedestación con ampliación de la base manual, patas bajas, carga operacional segura 160 kg
60300012	MiniLift160EE	Grúa móvil de bipedestación con ampliación de la base eléctrica, carga operacional segura 160 kg
60300013	MiniLift160EE	Grúa móvil de bipedestación con ampliación de la base eléctrica, patas bajas, carga operacional segura 160 kg

Visite [www.handicare.es](http://www.handicare.es) para más información



**handicare**

Handicare Iberia  
C/ Río Jarama 132, 10-13  
45007, Toledo  
T. (+34) 925 337 467  
info@handicare.es  
www.handicare.es

SystemRoMedic™ es una solución integral para facilitar transferencias. El concepto abarca cuatro áreas de productos que satisfacen la mayoría de las necesidades en diferentes situaciones de transferencia.

**Transferencia**, entre dos lugares. **Posicionamiento**, en el mismo lugar.

**Apoyo**, para la movilidad. **Elevación**, tanto manual como mecánica.